


INSUFLADOR LAP 100




**FUENTE DE INSUFLACION DE CO2 DIGITAL
AUTOMATICA PARA ENDOSCOPIOS**

INSUFLADOR LAP 200

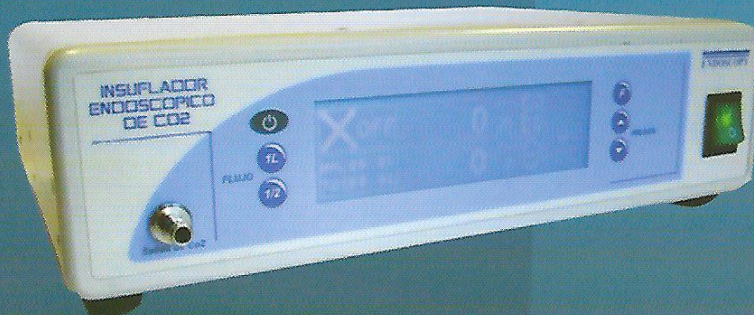

**FUENTE DE INSUFLACION DE CO2 DIGITAL
AUTOMATICA PARA ENDOSCOPIA VIRTUAL**

La solución definitiva para insuflación con CO2

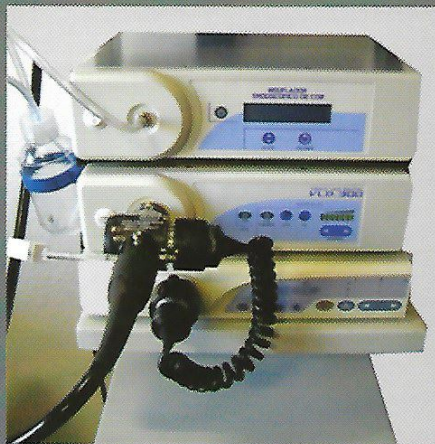

Insuflador de CO2 para la Endoscopia digestiva

Este insuflador de vanguardia ha sido desarrollado empleando las últimas tecnologías.

Es fácil de utilizar. Incluye numerosas funciones de seguridad y cumple las normas de calidad.

Es el único insuflador para endoscopia con una válvula externa de liberación de presión.

Los insufladores LAP son una fuente computarizada con un sistema de control electrónico automático integrado. Puede adaptarse a la mayoría de las situaciones y reacciona automáticamente a los parámetros de insuflado en tiempo real. Todas estas funciones ayudan a reducir al mínimo las molestias al paciente.

Especificaciones técnicas

Neumática:


Sistema de suministro de CO2 (conector de 7/16" USA)

Limita la presión máxima permitida en el colon con una válvula mecánica. Pantalla LCD en la que se visualiza: Caudal instantáneo, presión en el interior de la cavidad, volumen total de CO2 utilizado y nivel bajo en la botella de CO2.

Fuentes de alimentación:

Tipos de alimentación: 100 - 230 V CA 50 - 60 Hz

Protección por fusible

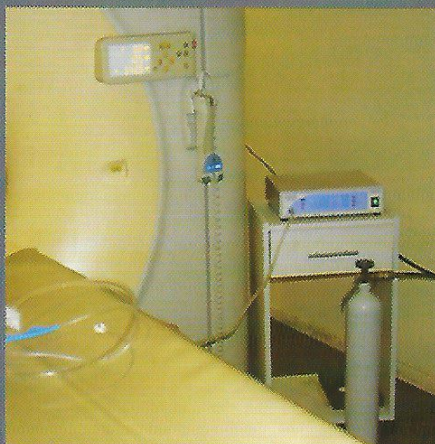

Este equipo permite una mayor comodidad para el paciente ya que le permite relajar los músculos y una mejor precisión a la hora de medir el volumen y el caudal de CO2.

ENDOSCOPY S.R.L.

Av. Rivadavia 1479 6º piso. (1033) Buenos Aires. Argentina

Teléfono: (011) 4383-0309 / 5440. Fax: (011) 4383-0309

www.endoscopy.com.ar / info@endoscopy.com.ar

 Endoscopy Argentina